


FaceGuard



Security Tech Germany

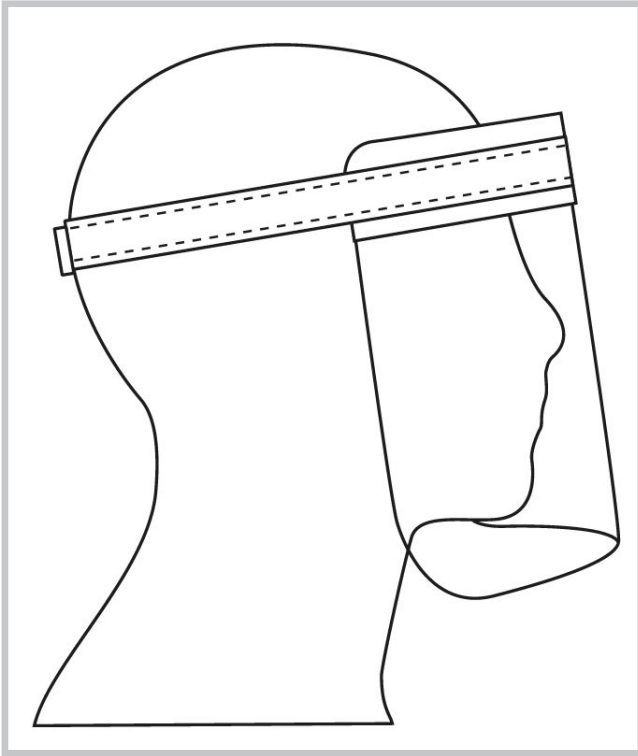

(DE) Gesichtsschild

Gesichtsschutz für Augen, Mund und Nase.

Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer.

Bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.

Kategorie II der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Testinstitut xyz

(GB) Faceshield

Face protection for eyes, mouth and nose.

Protection against fluid splashes.

Does not offer protection against mechanical action.

Category II PPE and conforms with Regulation (EU) 2016/425.

Testinstitut xyz

(FR) Bouclier de visage

Protège visage pour les yeux, la bouche et le nez.

Protection contre éclaboussures.

N'offre pas de protection contre les influences mécaniques.

Catégorie II du règlement (EU) 2016/425 pour l'équipement de protection (PSA) individuelle.

Testinstitut xyz

DE Wichtige Hinweise

Lagerung: Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern.
Maximale Lagerfähigkeit ohne Anwendung: 8 Jahre

Reinigung und Desinfektion: Zur Vermeidung von Kratzern wird eine milde Reinigung empfohlen. Verwenden Sie hierzu Wasser und (milde) Seife. Zur Reinigung bitte ein weiches Tuch verwenden. Die Desinfektion der Schutzscheibe kann durch Desinfektionsmittel erfolgen.
Bitte verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich milde handelsübliche Desinfektionsmittel.

Entsorgung: Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Konformität: Die vollständige Konformitätserklärung ist unter <https://docs.abus.com> zu finden.

GB Important information

Storage: Store without direct sunlight, in original packaging in a dry place.
Maximum storage suitability without use: 8 years

Cleaning and disinfection: A mild cleaning is recommended to avoid scratches. For this use water and (mild) soap. Use a soft cloth for the cleaning. The disinfection of the protective screen can be done by disinfectant.
Please use only mild and customary disinfectants.

Disposal: The product can be disposed thermally or disposed on a landfill without releasing toxic substances. For contaminated products the type of contamination determines the disposal, the applicable laws and regulations must be observed.

Conformity: The full declaration of conformity can be found at <https://docs.abus.com>.

FR Indications importantes

Stockage : A l'abri de soleil, en l'emballage d'origine dans un endroit sec.
Durée de conservation maximale, sans usage: 8 ans.

Nettoyage et désinfection : Afin d'éviter des rayures, un nettoyage doux est conseillé. Utilisez de l'eau et un savon (doux). Utilisez un chiffon mou. La désinfection du bouclier se fait par un produit désinfectant.
Utilisez uniquement des produits de désinfection doux et conforme aux usages commerciaux.

Mise au rebut : Le produit peut être éliminé thermiquement ou décharger sans libérer de substances toxiques. En cas de produits contaminés, l'élimination est déterminée par genre et étendue de la contamination, les lois et réglementations applicables sont alors à respecter.

Conformité : Pour consulter l'intégralité de la déclaration de conformité : <https://docs.abus.com>.

